

Minipresentatie: ophthalmoscoop

Summerschool 2-8-2017

Laurens Camfferman

Oogarts Meander Medisch Centrum (Amersfoort/Baarn)



Ophthalmoscoop



Instelschijf voor belichting

- Doorsnede: spleetbundel
- Belichting: groot rondje
- Funduscopie: rondje of halve rondje

Ophthalmoscoop



Instelling “Rokosschijf”

- Bekijken buitenkant van het oog: +20D (groen of zwart cijfertje)
- Funduscopie: +0D (+ verrekening bril bij afzetten)

Ophthalmoscopie

Heel dichtbij!

20D = scherp binnen 5 cm


“megaleesbrilstand”



Funduscopie (directe)

Heel dichtbij!

Weinig overzicht

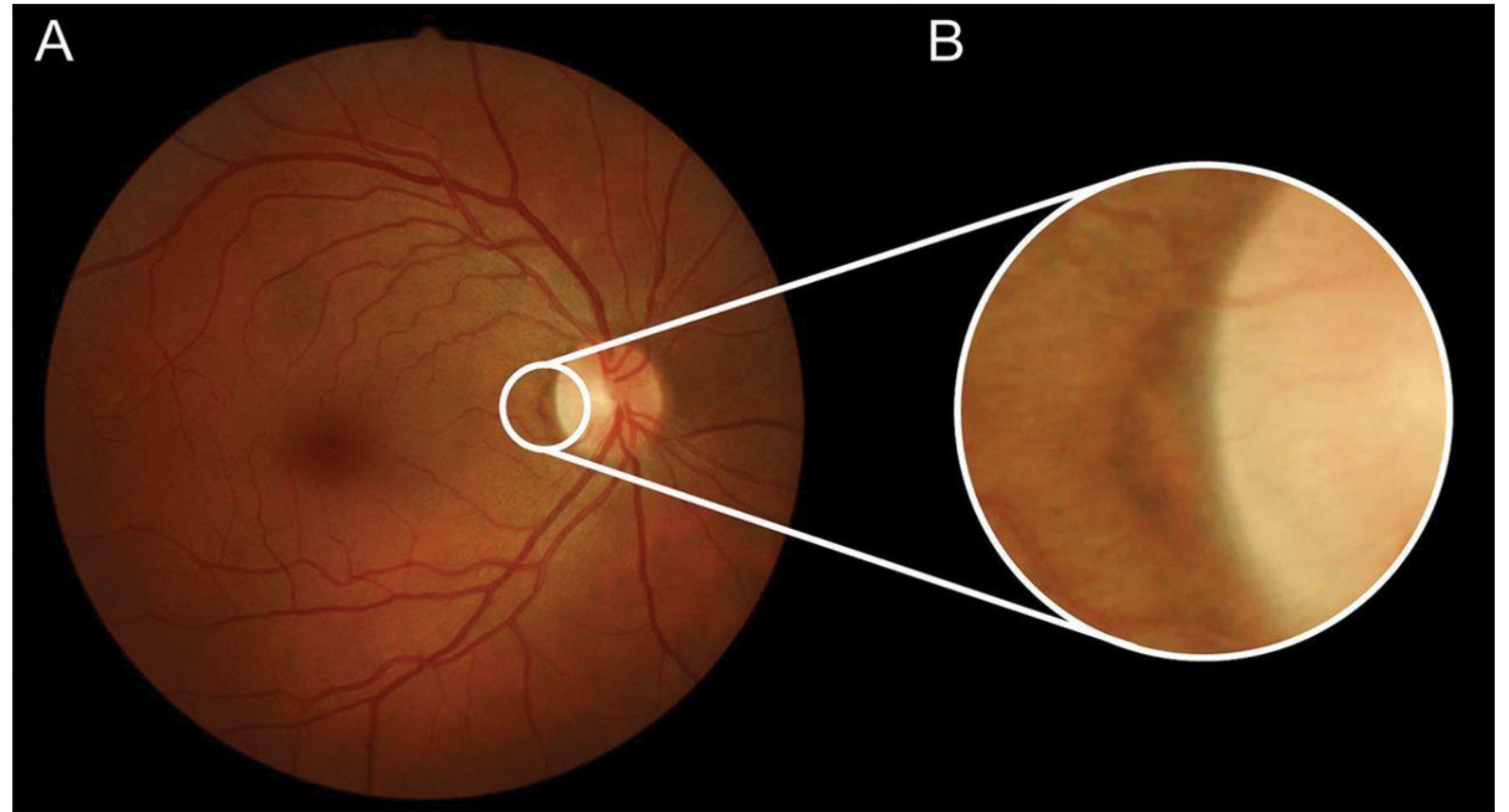

Ophthalmoscoop: gebruik hem!

